
INTRADERMIK
TEKAR TERAPIJA 448 kHz
ZA TERAPIJSKU PRIMENU
RÖS'S
Aesthetic & Health TECH

Intradermik je tehnologija kapacitivnog i rezistivnog elektromagnetnog prenosa, namenjena profesionalnim tretmanima oporavka, rehabilitacije i sportske pripreme.

RÖS'S, proizvođač tehnologije za terapijsku primenu, u razvoju ovog uređaja spaja udobnost, praktičnost, funkcionalnost i pouzdanost. Različiti nivoi energije i načini primene omogućavaju da tretman prilagodite potrebama svakog pacijenta.

PREDNOSTI UREĐAJA INTRADERMIK

SNAŽAN PRILAGODLJIV INOVATIVAN







Frekvencija od 448 kHz, snaga 450 VA u kapacitivnoj i 200 W u rezistivnoj primeni svrstavaju Intradermik među snažne uređaje u svojoj klasi.

Sistem Locked Loop održava stabilnu emisiju, dok softver prilagođava isporuku energije impedansi tretiranog tkiva.

Wi-Fi veza omogućava ažuriranje i proširenje softvera. Uređaj podržava veliki izbor dodataka, kao i tri izlaza za elektrostimulaciju za EMS, TENS i neuromodulacione struje.

Physiosystemic primena uz tekar terapiju omogućava veću slobodu pokreta terapeuta i pacijenta.

Patentirani sistem omogućava kombinovane načine primene i rad u različitim terapijskim oblastima.



PRENOSIVI MODEL
ŠIFRA 0089030

Visina: 200 mm · Širina: 390 mm
Dubina: 490 mm · Težina: 13 kg

Odobren, vodootporan i otporan na udarce. Dimenzije su prilagođene kabinskom prtljagu.

- EKRAN OSETLJIV NA DODIR 10,1”
- **PRIKAZ SNAGE, NAPONA, PROTOKA ENERGIJE I IMPEDANSE NA EKRANU.**
- FLEKSIBILNA POVRATNA PLOČA.
- **2 IZLAZA ZA TEKAR TERAPIJU I 3 IZLAZA ZA ELEKTROSTIMULACIJU.**
- SIGURNOSNI DALJINSKI UPRAVLJAČ.





STONI MODEL
ŠIFRA 0089060


Visina: 225 mm · Širina: 330 mm
Dubina: 353 mm · Težina: 10,5 kg

ISTA TEHNOLOGIJA, DVA RAZLIČITA MODELA

INTRADERMIK 448 kHz – DELOVANJE IZNUTRA, SISTEMSKI EFEKTI

Intradermik radi na frekvenciji od 448 kHz, poznatoj kao dijatermija ili tekar terapija. Elektromagnetno kolo se uspostavlja između aktivne elektrode i povratne ploče. Kapacitivna i rezistivna elektroda prenose energiju na različite načine, u zavisnosti od materijala i ciljanog tkiva.


KAPACITIVNA PRIMENA

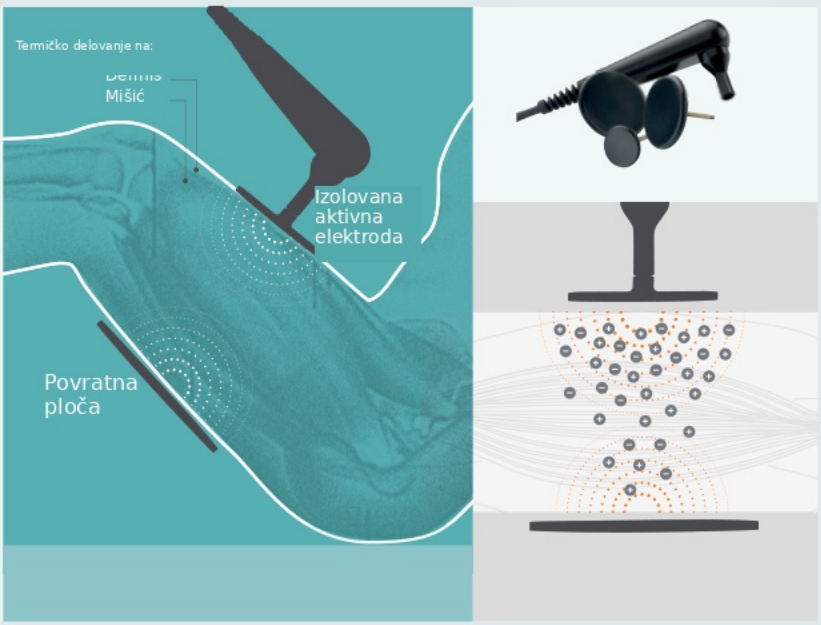

Primena se izvodi pokretnom metalnom elektrodom izolovanom plastičnim omotačem, dok se kolo zatvara povratnom pločom. Između elektroda nastaje električno polje.

Kretanje bipolarnih molekula vode postepeno povećava temperaturu u strukturama ispod aktivne elektrode, naročito u dermisu i mišićima.

REZISTIVNA PRIMENA

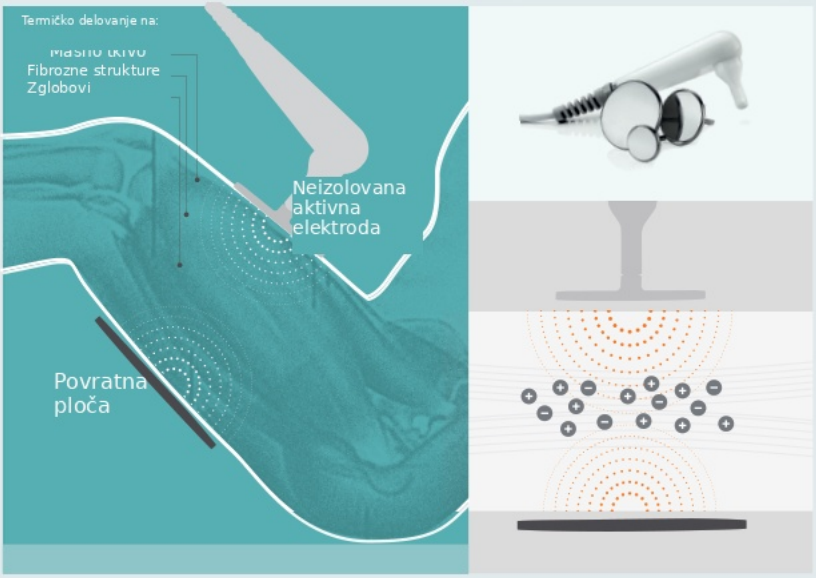


Primena se izvodi neizolovanom metalnom elektrodom i povratnom pločom. Energija se više usmerava ka strukturama koje pružaju veći otpor, kao što su koštane, tetivne i ligamentarne strukture.


Rezistivna primena moguća je klasičnim elektrodama, hands-free narukvicama ili sistemskom tehnikom, za sveobuhvatnu primenu na telu.

Izabrana frekvencija od 448 kHz široko je prepoznata u medicinskoj i fizioterapijskoj praksi.

Frekvencija podstiče kretanje jonskih naelektrisanja u tkivu. Efekat zavisi od primenjenog intenziteta: niži intenzitet daje manji osećaj toplote i pogodan je u akutnim fazama, dok viši intenzitet stvara izraženiji termički i vazodilatacioni efekat.

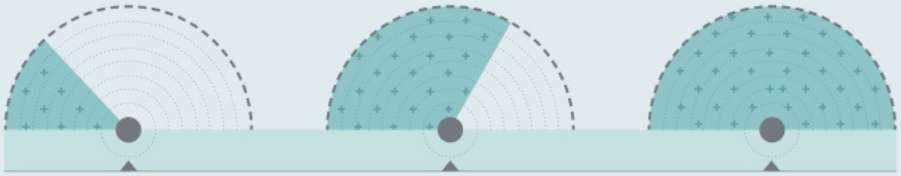

STEPEN INTENZITETA	INFRATERMIČKI INTENZITET	TERMIČKI INTENZITET	HIPERTERMIČKI INTENZITET
OSEĆAJ	Bez osećaja toplote, uz efekat jonske razmene.	Umeren porast osećaja toplote uz vazodilatacioni efekat.	Intenzivan osećaj toplote.
EFEKTI	• Ublažavanje bola. • Podrška drenaži edema i hematoma.	• Poboljšana oksigenacija i ishrana tkiva. • Poboljšanje elastičnosti tkiva. • Poboljšana vaskularizacija. • Podrška snazi i tonusu mišića.	• Hronična zapaljenska stanja. • Regeneracija tkiva.

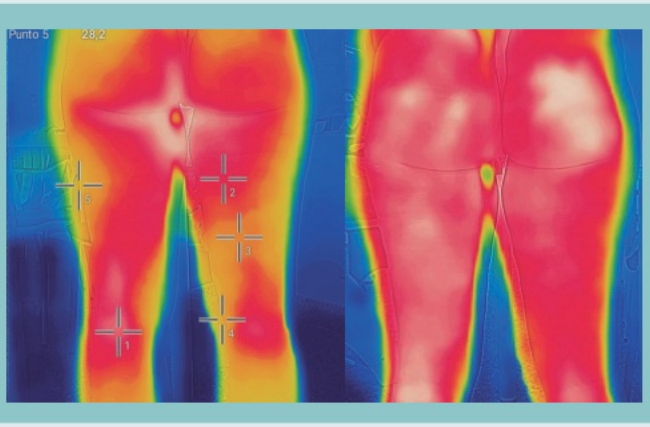

SVEOBUHVATNO POVEĆANJE TEMPERATURE TOKOM SISTEMSKOG TRETMANA

Podsticanje cirkulacije i venskog povratka.

INTRADERMIK TEHNOLOGIJA KAO PODRŠKA VAŠIM TRETMANIMA

Systemic® narukvice pružaju veliku raznovrsnost primene i omogućavaju prilagođeniji, brži i efikasniji rad.

HANDS-FREE PRIMENA PRILAGOĐAVANJE I PRECIZNOST

Rezistivne narukvice omogućavaju da energiju povežete sa manualnom terapijom, uz slobodu pokreta, preciznost i potpunu kontrolu primene.





SISTEMSKA PRIMENA SVEOBUHVATNI TRETMANI


Pogodno za aktivacione i relaksacione tretmane.

Dvostruka Systemic narukvica podržava cirkulaciju i ishranu tkiva.

Pasivna primena doprinosi relaksaciji, dok aktivna podržava elastičnost i mišićni tonus.

VEĆA SLOBODA POKRETA ZA TERAPEUTA I PACIJENTA



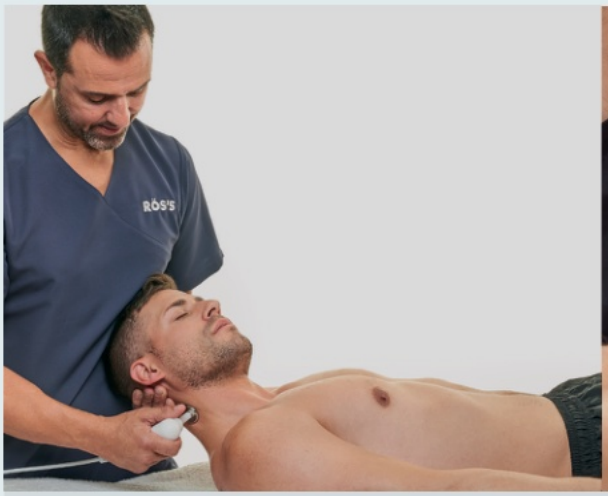



CILJANI TRETMANI TEKAR TERAPIJOM KOMBINOVANI TRETMANI SA ELEKTROSTIMULACIJOM

Ciljani ili sveobuhvatni tretmani prilagođeni potrebama pacijenta.



RAZNOVRSNE MOGUĆNOSTI PRIMENE

Dodaci proširuju funkcije uređaja i omogućavaju prilagođavanje različitim potrebama i uslovima rada.



INTIMNI PAKET | ŠIFRA 08BP096 PAKET POSEBNIH ELEKTRODA | ŠIFRA 08B00EE REZISTIVNA NARUKVICA | 08BP050 POVRATNA NARUKVICA | 08BP052

*Rezistivne i povratne narukvice nisu uključene u osnovni komplet uređaja Intradermik.

RÖS’S razvija i proizvodi tehnološku opremu za kozmetičke centre, estetsku medicinu i fizioterapiju. Uređaji su dizajnirani i proizvedeni u Španiji.

MCT SEE Office
Makenzijeva 53, 4. sprat, Beograd
mctseeoffice@mctsee.com | +381 11 383 77 53 |
www.mctsee.com

RÖS’S
Aesthetic & Health TECH

www.ross.es

RÖS'S C/ Molinot, 46-48 · 08860 Castelldefels (Barcelona) · e-mail:ross@ross.es · TEL. (34) 93 4266017